

ENGLISH
BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

WARNING & PRECAUTIONS

Skin damage can result by placing HOT or COLD FlexiPac direty on skin! Place FlexiPac in FlexiPac Wrap, Therma-Wrap or toweling before use. Monitor condition of skin while in use.

Consult physician before use on skin desensitized or non-speaking patients.

Apply to children and infants with extreme caution.

Overheating may rupture FlexiPac packaging and cause burns! If packaging is damaged, dispose in accordance with local, state and federal regulations.

Gel contents are harmful if swallowed!

If swallowed, call physician and drink water or milk.

APPLICATION INSTRUCTIONS

FlexiPac for Cold therapy:

Place FlexiPac in freezer for at least one hour. Place FlexiPac in FlexiPac Wrap, Therma-Wrap or in toweling before applying to skin. Apply to treatment area for approximately 15 minutes. Return to freezer after use.

FlexiPac for Hot Therapy:

Microwave: Place FlexiPac in « microwave-safe » container with pack completely covered with water. Heat in microwave on high setting for approximately 1-2 minutes. DO NOT exceed 2 minutes for each use. Overheating may cause FlexiPac to rupture and leak. Place FlexiPac in FlexiPac Wrap, Therma-Wrap or in toweling before applying to skin. Apply to treatment area for approximately 20 minutes. Allow FlexiPac to return to room temperature after use and before re-heating.

Stovetop: Bring pot of water to boil. Remove water from heat. Place FlexiPac in water for 8-10 minutes. Place FlexiPac in FlexiPac Wrap, Therma-Wrap or in toweling before applying to skin. Apply to treatment area for approximately 20 minutes. Allow FlexiPac to return to room temperature after use and before re-heating.

INTENDED FOR USE ON A SINGLE PATIENT

WARRANTY DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of one year from the date of sale.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

FRANÇAIS
LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Des brûlures de la peau peuvent être causées par le FlexiPac CHAUD ou FROID si posé directement sur la peau!

Placer le FlexiPac dans une housse FlexiPac ou Therma-Wrap, ou dans une serviette avant application sur la peau.

Surveiller l'état de la peau en cours d'utilisation.

Consulter un médecin avant de l'utiliser sur des patients à la peau insensible ou des patients muets.

Appliquer sur des enfants et des nourrissons avec une extrême prudence. La surchauffe peut rompre le FlexiPac et causer des brûlures! Si l'emballage est endommagé, éliminer conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux.

Le gel contenu dans le sachet est nocif en cas d'ingestion! En cas d'ingestion, appeler un médecin et boire de l'eau ou du lait.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

FlexiPac pour la Cryothérapie:

Placer le FlexiPac au congélateur pendant 1h. Placer le FlexiPac dans une housse FlexiPac ou Therma-Wrap, ou dans une serviette avant application sur la peau. Appliquer sur la zone à traiter pendant environ 15 minutes. Remettre au congélateur après usage.

FlexiPac pour la Thermothérapie:

Micro-ondes: Immerger totalement le FlexiPac dans un récipient rempli d'eau dans le micro-ondes. Faire chauffer le micro-ondes pendant environ 1 à 2 minutes. NE PAS dépasser 2 minutes par utilisation. La surchauffe peut provoquer la rupture et fuite du FlexiPac. Placer le FlexiPac dans une housse FlexiPac ou Therma-Wrap, ou dans une serviette avant application sur la peau. Appliquer sur la zone à traiter pendant environ 20 minutes. Laisser le FlexiPac revenir à température ambiante avant réutilisation et réchauffage.

Bain-marie: Porter la casserole d'eau à ébullition. Sortir l'eau du feu. Placer le FlexiPac dans l'eau pendant 8 à 10 minutes. Placer le FlexiPac dans une housse FlexiPac ou Therma-Wrap, ou dans une serviette avant application sur la peau. Appliquer sur la zone à traiter pendant environ 20 minutes. Laisser le FlexiPac revenir à température ambiante avant réutilisation et réchauffage.

GARANTIE DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période d'un an à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

ESPAÑOL
ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Si coloca FlexiPac directamente sobre la piel CALIENTE o FRIO puede dañarla!

Introduzca FlexiPac en la bolsa FlexiPac, Therma-Wrap o en una toalla antes de aplicarla sobre la piel.

Monitoree el estado de la piel durante el uso.

Consulte con su médico antes de utilizar FlexiPac sobre pieles sensibles o en pacientes con dificultades para hablar.

Utilizar en niños y bebés con extrema precaución.

Debido a sobrecalentamiento puede romperse embalaje FlexiPac y causar quemaduras! Si el embalaje está dañado , deseche el producto de acuerdo con las regulaciones locales.

El Gel que contiene es nocivo si se ingiere!

En caso de ingestión consulte a su médico y beba agua o leche.

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN

FlexiPac para terapia de frío:

Deje FlexiPac en el frigorífico durante al menos una hora. Introduzca FlexiPac en la bolsa FlexiPac, Therma-Wrap o en una toalla antes de aplicarla sobre la piel. Aplique el tratamiento sobre el área durante 15 minutos aproximadamente. Déjelo de nuevo en le frigorífico después de utilizarlo.

FlexiPac para terapia de calor:

Microondas: Coloque FlexiPac en el microondas en un recipiente completamente cubierto de agua. Active el microondas durante 1-2 minutos en opción alto. NO EXCEDA DE 2 MINUTOS POR CADA USO. Sobrecalentamiento puede causar la rotura de la bolsa FlexiPac. Introduzca FlexiPac en la bolsa FlexiPac, Therma-Wrap o en una toalla antes de aplicarla sobre la piel. Aplique el tratamiento sobre el área durante 20 minutos aproximadamente. Espere que FlexiPac vuelva a temperatura ambiente antes de recalentarlo.

Cocina de quemadores: Ponga una olla de agua a hervir. Retire la olla del quemador. Deje FlexiPac en el agua durante 8-10 minutos. Introduzca FlexiPac en la bolsa FlexiPac, Therma-Wrap o en una toalla antes de aplicarla sobre la piel. Aplique el tratamiento sobre el área durante 20 minutos aproximadamente. Espere que FlexiPac vuelva a temperatura ambiente antes de recalentarlo.

GARANTÍA DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante un año siguientes a la fecha de venta.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

DEUTSCH
VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Bei direkter Anwendung eines kalten oder warmen FlexiPac auf der Haut kann die Haut geschädigt werden.

FlexiPac vor der Anwendung auf der Haut in FlexiPac Wrap, Therma-Wrap oder ein Handtuch wickeln.

Überprüfen Sie während der Anwendung den Zustand der Haut.

Bei unempfindlichen oder nicht-verbalen Patienten vor Anwendung auf der Haut einen Arzt konsultieren.

Seien Sie sehr vorsichtig bei Anwendung bei Kindern. Überhitzungen können Risse im FlexiPac verursachen, wobei Brandwunden entstehen können! FlexiPac bei beschädigter Verpackung gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.

Gel enthält giftige Flüssigkeiten, diese dürfen nicht verschluckt werden! Bei Verschlucken des Gels einen Arzt aufsuchen und Wasser oder Milch trinken.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

FlexiPac für Kältetherapie:

FlexiPac mindestens 1 Stunde lang ins Gefrierfach legen. FlexiPac vor der Anwendung auf der Haut in FlexiPac Wrap, Therma-Wrap oder ein Handtuch wickeln. Mindestens 15 Minuten lang auf die zu behandelnde Oberfläche legen. Nach Gebrauch wieder ins Gefrierfach zurücklegen.

FlexiPac für Wärmetherapie:

Mikrowelle: FlexiPac in eine „mikrowellenfeste“ Schale legen und vollständig mit Wasser bedecken. In der Mikrowelle auf hoher Stufe ca. 1-2 Minuten erhitzen. NIE länger als 2 Minuten pro Anwendung. Eine Überhitzung des FlexiPac kann zu Rissen und Lecken führen. FlexiPac vor der Anwendung auf der Haut in FlexiPac Wrap, Therma-Wrap oder ein Handtuch wickeln. Mindestens 20 Minuten lang auf die zu behandelnde Oberfläche legen. FlexiPac nach dem Gebrauch und vor erneutem Aufwärmen wieder auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.

Heißes Wasser: Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Den Topf vom Herd nehmen. FlexiPac 8-10 Minuten lang ins Wasser legen. FlexiPac vor der Anwendung auf der Haut in FlexiPac Wrap, Therma-Wrap oder ein Handtuch wickeln. Mindestens 20 Minuten lang auf die zu behandelnde Oberfläche legen. FlexiPac nach dem Gebrauch und vor erneutem Aufwärmen wieder auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.

FÜR DEN GEBRAUCH DURCH EINEN EINZIGEN PATIENTEN BESTIMMT

GARANTIE DJO, LLC garantiert bei Material- oder Herstellungsdefekten die Reparatur bzw. den Austausch des kompletten Produktes oder eines Te

DANSK

LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

ADVARSEL OG FORHOLDSREGLER

Hud skader kan opstå hvis FlexiPac lægges direkte på huden varm eller kold.
Kom FlexiPac i FlexiPac Wrap, Therma-Wrap eller håndklæde inden den lægges på huden.
Hold øje med huden under behandlingen.
Kontakt lægen før anvendelse af patienter med overfølsom hud eller ikke talende patienter.
Anvendes med stor forsigtighed på børn og spædbørn.
Overophedning kan resultere i at FlexiPac springer læk og kan forårsage brandskader! Hvis indpakningen er skadet kasser da pakken i forhold til gældende regler i Danmark.
Gel indholdet i FlexiPac er farligt at indtage! – ved indtagelse kontakt da straks læge og drik vand eller mælk.

VEJLEDNING I PÅSÆTNING

FlexiPac til kuldebehandling:

Kom FlexiPac i fryseren i mindst en time.
Kom FlexiPac i FlexiPac Wrap, Therma-Wrap eller et håndklæde inden den lægges på huden.
Lægges på behandlingsområdet i ca. 15 minutter.
Lægges tilbage i fryseren efter anvendelse.

FlexiPac til varmebehandling:

Mikrobølgeovn:
Kom FlexiPac i en mikrobølgeovns sikker beholder – den skal dækkes helt med vand.
Opvarm i mikrobølgeovn på højeste indstilling i ca. 1-2 minutter – må IKKE opvarmes mere end 2 minutter pr. opvarmning.
Overophedning kan være årsag til at FlexiPac går i stykker og begynder at lække.
Kom FlexiPac i FlexiPac Wrap, Therma-Wrap eller håndklæde inden den lægges på huden.
Lægges på behandlingsområdet i ca. 20 minutter.
Lad FlexiPac afkøle til rumtemperatur efter anvendelse samt for næste anvendelse.

Komfur:
Bring en gryde med varm i kog.
Tag gryden væk fra varmen.
Kom FlexiPac i det varme vand i 8-10 minutter.
Kom FlexiPac i FlexiPac Wrap, Therma-Wrap eller håndklæde inden den lægges på huden.
Lægges på behandlingsområdet i ca. 20 minutter.
Lad FlexiPac afkøle til rumtemperatur efter anvendelse samt for næste anvendelse.



LATEXFRI

TILTÆNKT BRUG PÅ EN ENKELT PATIENT

GARANTI Op til 1 år efter købsdatoen vil DJO, LLC helt eller delvist reparere eller udskifte udstyret og dets tilbehør i tilfælde af fejl i materialer eller udførelse.

ERKLÆRING: SELVOM DER ER GJORT ALT HVAD AVANCEREDE TEKNIKKER KAN GØRE FOR AT OPNÅ DEN FØRENEDE MAKSIMALE FUNKTION, STYRKE, HOLDBARHED OG BEKVEMMELIGHED, ER DETTE IKKE NOGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNGÅ LESIONER VED AT BRUGE DETTE PRODUKT.

SVENSKA

LÅS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Hudskador kan uppstå vid placering av en varm eller kall FlexiPac direkt på huden!
Placera FlexiPac i FlexiPac Wrap, Therma-Wrap eller frotté före användning.
Övervaka huden under användning.
Kontakta läkare före användning på patienter med överkänslig hud eller icke-talande patienter.
Använd på barn och spädbarn med yttersta försiktighet.
Overhettning kan orsaka FlexiPac att spricka och orsaka brännskador! Om förpackningen är skadad, kassera i enlighet med gällande lagar och gældende regler i Norge.
Gel-innehållet är farligt vid förtäring! Vid förtäring, kontakta läkare och drick vatten eller mjölk.

ANVISNINGAR FÖR APPLICERING

FlexiPac för kylbehandling:

Placera FlexiPac i frysen i minst en timme.
Placera FlexiPac i FlexiPac Wrap, Therma-Wrap eller frotté innan den läggs på huden.
Placera på behandlingsområdet i ca. 15 minuter.
Lägg tillbaka i frysen efter användning.

FlexiPac för värmebehandling:

Mikrovågsugn:
Placera FlexiPac i en mikrovågsgnssäker behållare helt täckt med vatten.
Värm i mikrovågsgugn på hög inställning i ungefär 1-2 minuter, överstig INTE 2 minuter per uppvärmning.
Overhettning kan orsaka FlexiPac att gå sönder och läcka.
Placera FlexiPac i FlexiPac Wrap, Therma-Wrap eller frotté innan den läggs på huden.
Placera på behandlingsområdet i ca. 20 minuter.
Tillåt FlexiPac att svalna till rumtemperatur efter användning och före nästa återuppvärmning.

Spishäll:
Koka upp en kastrull med vatten.
Ta bort vattnet från varmen.
Placera FlexiPac i det varma vattnet i 8-10 minuter.
Placera FlexiPac i FlexiPac Wrap, Therma-Wrap eller frotté innan den läggs på huden.
Placera på behandlingsområdet i ca. 20 minuter.
Tillåt FlexiPac att svalna till rumtemperatur efter användning och före nästa återuppvärmning.



INNEHÅLLER INTE LATEX

AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ EN ENDA PATIENT

GARANTI DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör vad gäller defekter i material och utförande under en period på 1 år från försäljningsdatum.

OBS! ALLA ANSTRÄNGNINGAR HAR GJORTS OCH MODERN TEKNIK ANVÄNTS FÖR ATT UPPNÅ MAXIMAL ÖVERENSSTÄMMELSE AV FUNKTION, STYRKA, HÅLLBARHET OCH KOMFORT, MEN INGA GARANTIER LÄMMAS ATT SKADA FÖRHINDRAS GENOM ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT.

NORSK

FØR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR NØYE. DET ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Hudskader kan oppstå hvis FlexiPac legges direkte på huden varm eller kald.
Legg FlexiPac i FlexiPac Wrap, Therma-Wrap eller håndkle innen den legges på huden.
Hold øye med huden under behandlingen.
Kontakt lege før behandling av pasienter med overfølsom hud eller pasienter som ikke snakker.
Brukes med stor forsiktighet på barn og spebarn.
Overopphting kan resultere i at FlexiPac lekker og kan forårsake brannskader! Hvis innpakningen er skadet, kasser da pakken i henhold til gjeldende regler i Norge.
Gel-innholdet i FlexiPac er farlig å svelge! – ved i inntak kontakt lege straks og drikk vann eller melk.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

FlexiPac til kuldebehandling:

Legg FlexiPac i fryseren i minst en time.
Legg FlexiPac i FlexiPac Wrap, Therma-Wrap eller et håndkle før den legges på huden.
Lægges på behandlingsområdet i ca. 15 minutter.
Lægges tilbake i fryseren etter bruk.

FlexiPac til varmebehandling:

Mikrobølgeovn:
Plasser FlexiPac i en mikrobølgeovnsikker beholder – den skal dekkes helt med vann.
Varm i mikrobølgeovn på høyeste innstilling i ca. 1-2 minutter – må IKKE varmes mere enn 2 minutter pr. gang.
Overopphting kan være årsak til at FlexiPac går i stykker og begynner å lække.
Legg FlexiPac i FlexiPac Wrap, Therma-Wrap eller håndkle innen den legges på huden.
Lægges på behandlingsområdet i ca. 20 minutter.
La FlexiPac avkjøles til romtemperatur etter bruk samt før neste oppvarming.

Komfyr:
Kok opp en kjele med vann.
Ta kjelen av varmen.
Legg FlexiPac i det varme vannet 8-10 minutter.
Legg FlexiPac i FlexiPac Wrap, Therma-Wrap eller håndkle innen den legges på huden.
Plasseres på behandlingsområdet i ca. 20 minutter.
La FlexiPac avkjøle til romtemperatur etter bruk samt før neste oppvarming.



LATEX FREE

BARE MENT FOR BRUK PÅ EN PASIENT

GARANTI DJO, LLC vil reparere eller erstatte hele eller deler av enheten og dens tilbehør for defekter i materialer eller utførelse i en periode på 1 år fra salgsdatoen.

ERKLÆRING: SELV OM DET ER GJORT ALT SOM KAN GJØRES MED AVANSERTE TEKNIKKER FOR Å OPPNÅ MAKSIMAL FUNKSJON, STYRKE, HOLDBARHET OG KOMFORT, ER DET INGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNNGÅ SKADER VED Å BRUKE DETTE PRODUKTET.

SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALTA.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET

Pakkauksen käyttäminen suorassa ihokontaktissa ilman pyyhettä tms. voi aiheuttaa iholle vaurion!
Tarkkaile ihon reaktioita hoidon aikana
Konsultoi lääkäriä, jos potilaalla on tuntopuutoksia tai potilas on kykenemätön kommunikoidmaan
Hoidettaessa vauvoja ja pieniä lapsia on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta
Liiallinen kuumennus voi aiheuttaa pakkauksen repeämisen ja näin aiheuttaa palovammoja! Jos pakkaus rikkoontuu,se tulee hävittää säännönmukaisesti
Pakkauksen geeli on haitallista nieltynä! Jos geeliä niellään ,tulee ottaa yhteyttä lääkäriin ja juoda vettä tai maitoa!

PUKEMISOHJEET

FlexiPac kylmäterapiaan:

Aseta FlexiPac pakastimeen väh. Tunnin ajaksi
Aseta FlexiPac FlexiPac Wrap:iin,Therma Wrap :iin tai pyyhkeeseen ennen asettamista ihoa vasten
Käytä hoito-alueella n. 15 min ajan
Laita hoidon jälkeen pakkaus takaisin pakastimeen

FlexiPac lämpö-hoidossa:

Mikro-aalto -uunissa lämmitys:
Aseta FlexiPac mikro-aaltouunia kestävään astiaan,niin että pakkaus on kokonaan veden peitossa
Lämmitä täydellä teholla n. 1-2 min, ÄLÄ ylitä 2 min lämmitystä!
Liika kuumennus voi vaurioittaa pakkausta (vuotovaara/repeytyminen)
Aseta FlexiPac FlexiPac Wrap:iin, ThermaWrap:iin tai pyyhkeeseen ennen asettamista ihoa vasten
Käytä hoito-alueella n. 20 min ajan
Anna pakkauksen jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen uudelleen lämmitystä

Lämmitys esim. Sähköilellä:
Kuumenna vesi kattilassa ja kun vesi kiehuu,poista kattila levyltä ja aseta FlexiPac kuumaan veteen n. 8-10 min ajaksi
Aseta FlexiPac FlexiPac Wrap:iin, ThermaWrap:iin tai pyyhkeeseen ennen asettamista ihoa vasten
Käytä hoito-alueella n. 20 min ajan
Anna pakkauksen jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen uudelleen lämmitystä



UTEN LATEKS

SUOSITELLAAN YHDEN POTILAAN KAYTTOON

TAKUU DJO, LLC korjaa tai vaihtaa materiaali- tai valmistusvikaiset tuotteet tai tuotteiden osat sekä lisävarusteet aikana 1 vuosi myyntipäivästä.


HUOMAUTUS: VAIKKA UUSIMPIA TEKNIKOITA KÄYTTÄMÄLLÄ ON PYRITYY VARMISTAMAAN, ETTÄ TOIMIVUUS, VAHVUUS, KESTÄVYYYS JA MUKAVUUS OLISIVAT PARHAAT MAHDOLLISET, MITÄÄN TAKUITA EI ANNETA SIITÄ, ETTÄ VAHINKO VOITAIISIIN ESTÄÄ TÄTÄ TUOTETTA KÄYTTÄMÄLLÄ.

©2015 DJO, LLC

13-3000 REV A
www.DJOGlobal.com
T: +1.800.526.8785
USA
1430 Decision Street
Schaumburg, IL 60196
DJO, LLC



MDS GmbH
Schiffgraben 41
3075 Hannover
Germany

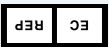

chattanooga

FLEXIPAC®

